

SkanFlexi®

X500

Lector de pruebas rápidas

Para uso diario en el laboratorio clínico



La sistematización en la lectura de sus pruebas rápidas de una forma eficiente y segura a un precio económico.

Si alguna vez piensa en acreditar sus técnicas rápidas, Skanflexi® X500 puede ayudarle.

MONLAB

SERVICIOS PARA LABORATORIOS
DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO

30 ANYS
ANOS
UNTERSKA
YEARS

1985-2015

¿Cómo usar SkanFlexi®X500 en 5 pasos?

1 Abrir tapa.



2 Seleccionar y colocar pruebas a analizar.



3 Cerrar tapa.



4 Elija lectura inmediata o bien:




4' Elija INCUBAR Y LEER.

(el sistema determinará los distintos tiempos de incubación si los hubiera)



5 Visualizar resultados, identificar muestra, añadir comentarios, enviar on-line...

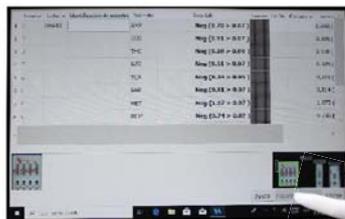

SkanFlexi®X500

Lector de pruebas rápidas

Características principales

-SkanFlexi®X500 es un lector para pruebas rápidas en placa, incluso TIRAS/STRIPS.

-Especialmente útil en la lectura de cassetes multiparamétricos, como pueden ser las pruebas multidrogas de 5, 10 o 12 parámetros.

-Lectura fácil y rápida. 1 solo click en su pantalla táctil y en 15 segundos tendrá el resultado en pantalla de todos los analitos y una foto escaneada de la placa que podrá guardar junto al resultado del paciente si lo desea.

-Posibilidad de lectura directa inmediata o de incubación de los tests en el propio SkanFlexi®X500.

OLVÍDESE DE CRONÓMETROS EXTERNOS PARA RECORDARLE CUANDO LEER SUS TEST RÁPIDOS.

-Posibilidad de transmitir los resultados al LIS a través de un puerto Ethernet.

-Si no lo tiene conectado a su red, posibilidad de guardar los últimos 10000 resultados en su memoria.

-Pantalla táctil. Software intuitivo. En 5 minutos aprenderá a utilizarla.

-Software actualizable por internet o USB.

-3 puertos USB para conectar impresora, lector de código de barras, teclado externo o memoria USB.

-Posibilidad de ampliar el panel de pruebas a petición del cliente.

Lectura de cassetes individuales y multiparamétricos

Respiratorias

- Adenovirus respiratorio
- RSV
- Influenza A+B
- StrepA

Heces

- C. difficile A/B
- C. difficile GDH
- C. difficile GDH + A/B
- Rota adenovirus
- Astrovirus
- Norovirus
- Giardia
- FOB
- H.pylori

Orina

- Legionella
- S. pneumoniae
- Combo Legio-Pneumo
- Panel 5 multidrogas
- Panel 10 multidrogas
- Panel 12 multidrogas
- hcg
- S. pneumoniae (en tira)

Drogas individuales monlabtest

MONLAB SL.

30 ANYS ANOS ANNI ANNEA YEARS

1985 - 2015

SERVICIOS PARA LABORATORIOS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO

C/ Selva de Mar, 48 - 08019 Barcelona - Spain

Tel: +34 934 335 860 Fax +34 934 363 894

www.monlab.es

pedidos@monlab.es

